



implance.com

# AGGRESSOR

ANINDA YÜKLEME



**AGS Medikal Ürünleri İth. İhr. Tic. A.Ş.**  
Katip Salih Sok. No: 111 34718 Koşuyolu / İstanbul / Türkiye  
T +90 216 546 00 78 F +90 216 546 00 79

implance.com

**IMPLANCE**  
Dental Implant System

# AGGRESSOR

## Sınırsız uygulama imkanı sağlayan **Aggressor implant.**

Çekim sonrası anında yükleme olanağı sunan Aggressor, geliştirilmiş agresif yiv tasarımı sayesinde çene kemiğinin boyun bölgesinde stres oluşturmaz. Apekte doğru yiv derinliği artırılan Aggressor implant, çene kemiğinin apeksinden destek olarak yüksek primer stabilite değerlerine ulaşılır.

Apikaline doğru konikliği artırılmış implant, gövde tasarımı sayesinde yeni çekim soketinde ve D3-D4 kemik tipinde bile üstün primer stabilite sağlar.



Ø3.7

Uzunluk (mm)	Ürün Kodu
10.0	BFAR3710
12.0	BFAR3712
14.0	BFAR3714



Ø4.3

Uzunluk (mm)	Ürün Kodu
10.0	BFAR4310
12.0	BFAR4312
14.0	BFAR4314



Ø4.8

Uzunluk (mm)	Ürün Kodu
10.0	BFAR4810
12.0	BFAR4812
14.0	BFAR4814

- Geliştirilmiş agresif yiv tasarımı.
- Doğal kök formu.
- Apekte daha keskin yivler.
- Daha fazla kemik teması.
- Her kemik tipinde kuvvetli tutunma.
- Çekim sonrası hemen implant uygulaması ve anında üzerine yükleme protokolü.




## Kendinden Stoperli Frezler

Kendinden stoperli frezler, kullanıcılara büyük kolaylıklar tanımakta ve hata yapma olasılığını sıfıra indirmektedir.

Implance Aggressor frezleri 200-300 rpm hızda çalışabilmektedir, böylece fazladan oluşan ısının neden olduğu hücre ölmesi engellenmektedir. Düşük devirde çalışmanın hekime sağladığı diğer avantaj ise, çıkan kemik tozlarının daha sonra hastanın tedavisinde sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesidir.

Implance Aggressor implantın konik yapısına uygun dizayn edilmiş daha konik yapıdaki frezleri sayesinde daha yüksek primer stabilite değerlerine ulaşılabilir.

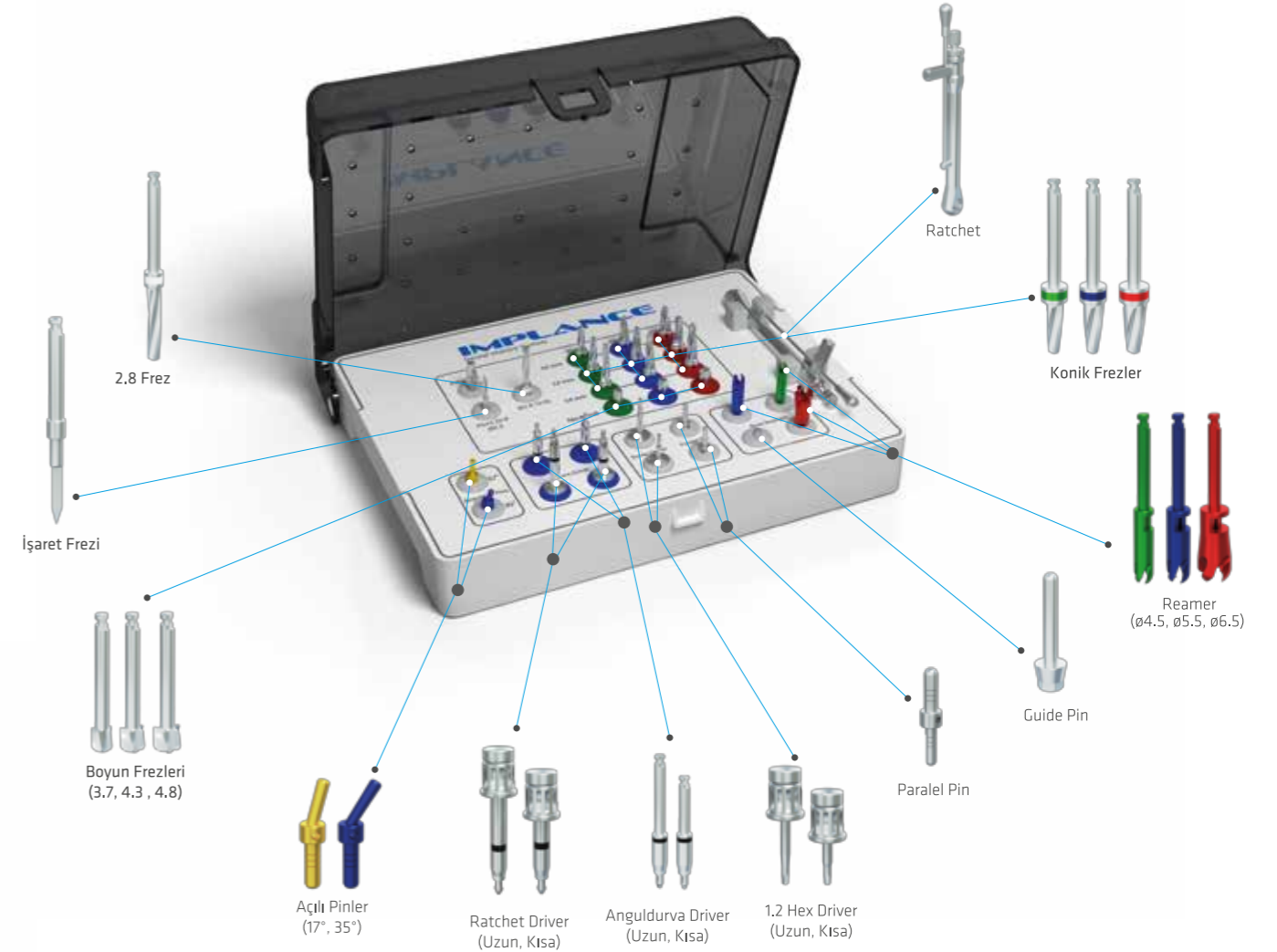

## Yardımcı Frezler

Üç farklı çapta dizayn edilmiş Bone Reamer ile kemiğe yerleştirilmiş implantın boyun kısmında bulunan fazla kemiği kazıyarak abutmentların daha rahat oturması için en uygun çıkış platformu oluşturulabilmektedir.